




Think inside
the box

PURELAB® Chorus 3*

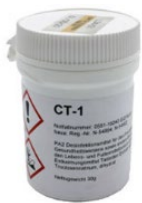

Desinfektionstabletten ECT1

Typischer Austauschintervall** : 6 Monate

Was wird aus dem Wasser entfernt?

Zur regelmässigen Desinfektion der wasserberührenden Anlageteile

Was passiert, wenn der Artikel nicht getauscht wird?

Biofilme können entstehen und zur dauerhaften mikrobiellen Verunreinigung führen.



Vorbereitungspack ELC241

Typischer Austauschintervall** : 6 Monate

Was wird aus dem Wasser entfernt?

Chlor, Partikel und Organik

Was passiert, wenn der Artikel nicht ersetzt wird?

Chloramine und organische Stoffe werden nicht optimal zurückgehalten und belasten zunehmend die nachgeschaltete Umkehrosiose, die dadurch häufiger getauscht werden müssen und die Betriebskosten steigern können.



Umkehrosiose ELC240

Typischer Austauschintervall** : 24 Monate

Was wird aus dem Wasser entfernt?

Die Mehrheit der organischen und anorganischen Stoffe aus dem Wasser

Was passiert, wenn der Artikel nicht getauscht wird?

Verunreinigungen bleiben im Wasser und vermindern die Lebensdauer vom Vorbereitungspack.

Hinweis: Austausch erfordert Technikeinsatz



Belüftungsfiter ELC216

Typischer Austauschintervall** : 6 Monate

Welchen Schutz bietet dieser Artikel?

Schützt das aufbereitete Wasser im geschlossenen Vorratstank vor CO₂ und Verunreinigungen aus der Umgebungsluft

Was passiert, wenn der Artikel nicht getauscht wird?

Mögliche erneute Kontamination des bereits aufbereiteten Wassers

* Eine Kombination aus Aufbereitungstechnologien erzeugt die Wasserreinheit gemäss Spezifikation.

** Die Angaben zum Wechselintervall sind Richtwerte und von der jeweiligen Anwendung sowie Qualität des Speisewassers anhängig.

